

快速導引

在正確的使用方法之下，雷射健髮梳是非常有效的產品。是由精密的零件製造而成的，在正常的操作之下，可以持續使用很多年。

我們建議每次使用雷射健髮梳不少於 5 分鐘，也不超過 15 分鐘

- 頭 4 週每週使用 3 次
- 之後每週 2 次

我們建議雷射健髮梳使用在洗淨的頭皮上。你的頭髮可以是溼的、吹風機吹乾的或是用毛巾擦乾的。雷射健髮梳應該在使用任何作用在頭皮上的髮膠、外用生髮水、噴髮膠或是噴霧假髮類產品前使用。




1. 把變壓器的電源輸出接頭插入雷射健髮梳。



2. 把變壓器插頭插入牆上的插座。



3. 按"Power"鈕一次,然後按"Laser"鈕一次已啟動健髮梳。

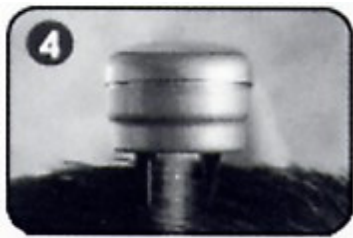

4. 把雷射梳平放在頭皮上,使兩排梳齒接觸到你的頭皮。



Stop and holding 4-5 seconds every 1/2 inch.

5. 一步步的移動雷射梳,每次在頭皮上的一個地方停4或5秒然後移動1/2英吋(1.27公分)到頭皮上下一個地方。(心中默念"one thousand, two thousand, 等." 可能會有幫助你掌握時間)。

6. 逆著頭髮生長的方向移動健髮梳。蓄長頭髮者，在健髮梳移動的前方，用一般的梳子或是你的手撩起頭髮。使健髮梳照上述的方式完整經過全部的頭皮達兩次。
7. 使用後按"power"鈕關掉電源，移除牆上的變壓器，把健髮梳放入收納盒中。

注意事項

- 每次使用健髮梳的時間應該是介於 5~15 分鐘之間。

- 緩慢的移動健髮梳。這是非常重要的，如果你移動得太快，使用上將不會有效果。
- 如同一般的治療，我們建議你不要過量使用健髮梳，多餘的使用會導致較沒用的效用。