

HairMax 雷射健发梳

一个典型的使用者经验

我们大家都知道，皮肤是需要光线的，你的头发也不例外。HairMax 雷射健发梳强大的、安全的以及激发性的雷射光能把能量传递到你的头皮以及毛囊中。

透过光生物激发（PhotoBioStimulation）的原理，雷射光照治疗（Laser Phototherapy）持续在改进它的品质、强度以及你头发的厚度上努力。雷射光线治疗（Laser light therapy），也称光子治疗（photo therapy）在医学界普遍的被认为是一种安全、有效且没有已知副作用的疗法。

事实上，国际上的经验以及研究发现雷射光子疗法的效用，已经远远超过我们在网站上所描述的。

每个人的使用成果都不一样，但在前 6~12 周里，你应该能够注意到你头发普遍的改进或是激活化的发生。这些的进步包括头皮状况的正常化，头发的光泽以及厚度的增加。然后，在接下来的数月里，你可能会注意到你的头发渐渐的丰厚而且强壮。经过一段时日，所有的使用者 –男人以及女人– 通常会注意到使用 HairMax 雷射健发梳所持续性增多的益处。相反的，一旦停止使用，我们的经验是头皮及头发的状况会逐渐回复到使用前的状态。

就像是刷牙保持你牙齿及牙龈的健康一样，我们建议你规律的使用 HairMax 雷射健发梳来维持你所得到的成效。只需一周一次或两次，每次 10 分钟就足以维持你使用它所获得的成果了。

更多信息，请参考

www.tsaitien.com.tw

以上内容才天企业保留一切版权

使用雷射健发梳的重要指引

我们建议每次使用雷射健发梳不少于 5 分钟，也不超过 15 分钟

- 头 4 周每周使用 3 次
- 之后每周 2 次

我们建议雷射健发梳使用在洗净的头皮上。你的头发可以是湿的、吹风机吹干的或是用毛巾擦干的。雷射健发梳应该在使用任何作用在头皮上的发胶、外用生发水、喷发胶或是喷雾假发类产品前使用。




1. 把变压器的电源输出接头插入雷射健发梳。



2. 把变压器插头插入墙上的插座。



3. 按"Power"钮一次, 然后按"Laser"钮一次已启动健发梳。

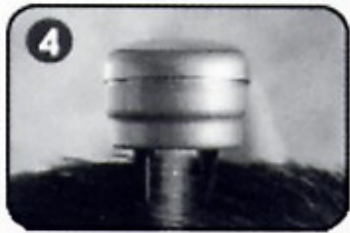

4. 把雷射梳平放在头皮上, 使两排梳齿接触到你的头皮。



5. 一步步的移动雷射梳, 每次在头皮上的一个地方停4或5秒然后移动1/2英(1.27公分)到头皮上下一个地方。(心中默念"one thousand, two thousand, 等." 可能会有帮助你掌握时间)。

6. 逆着头发生长的方向移动健发梳。蓄长头发者, 在健发梳移动的前方, 用一般的梳子或是你的手撩起头发。使健发梳照上述的方式完整经过全部的头皮达两次。
7. 使用后按"power" 钮关掉电源, 移除墙上的变压器, 把健发梳放入收纳盒中。

注意事项

- 每次使用健发梳的时间应该是介于 5~15 分钟之间。
- 缓慢的移动健发梳。这是非常重要的, 如果你移动得太快, 使用上将不会有效果。
- 如同一般的治疗, 我们建议你不要过量使用健发梳, 多余的使用会导致较没用的效用。


重要的安全指示
-使用前请仔细阅读-

雷射安全 警告及注意事项:

1. 不要直视激光束或雷射藉由镜面物所反射的光束（因为这样如同光束直射眼睛）。
2. 不要让激光束直射或照射你眼睛的周围。
3. 不要放在让小孩拿得到的地方，也不要放在镜子前使用雷射。
4. 永远不要用雷射光照射任何人。
5. 用在具有放大功能的光学仪器上时，如果雷射光直接照射眼睛可能会造成眼睛的危害。
6. 请勿试着修理、深入、改造或阻碍任何使用中的电器用品或是电器用品的任何部分。
7. 只能遵照说明书上的指示使用、清理步骤，或是操作步骤。

注意：这个器具没有使用者可自行安装的零件。

以下的安全卷标可以在本产品上发现：

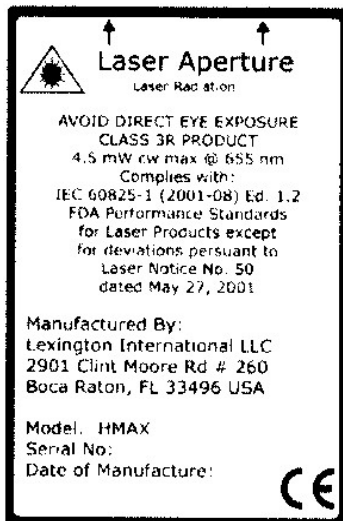

位置：把手的末端

电器安全

使用任何电器用品，特别是小孩在场时，应该观察到使用时的基本安全不确定事项。

危险：远离水。如同大部分的电器产品，跟水接触时会导致触电。

为了要减低触电产生的危险：

- 使用后马上把电器从插座上拔下。
- 洗澡时不可使用。
- 不要把电器放置在易于掉入澡盆或水槽的地方。
- 不要把电器暴露在流动的水前，掉落在水中或其它液体中。
- 如果电器掉落在水中，要马上从插座上拔除。不要试着从水中取出，也不要碰触水。
- 如果在靠近水的地方使用电器，建议使用有接地短路保护线路的电源线。

警告：为了要减低燃烧电烧，失火或受伤的风险：

- 全程注意使用本电器。
- 当有儿童靠近时，特别注意使用本电器。儿童是天生好奇的，本产品不是玩具，而且不应当在镜子前玩耍。
- 永远遵照本产品说明书的用途使用。
- 如果电源线或插头损坏，或是故障、摔落、损坏或是泡过水，请不要使用，请退回本公司作进一步的检查保养或维修。
- 电源线应避免靠近热源。

注意：如果发生故障，请勿私自维修，本产品没有使用者可自行更换的零件。

电源供应器规格：

变压输出：9V，最小安培 300mA。插头：2.1mm x 5.5mm。

台湾以外地区使用时，请确定变压器符合以上规格。

保养指示


- 清洁时，永远把电器从插座上移除。
- 警告！不要将丙酮或任何其它溶解液用于本产品。使用丙酮或任何其它溶解液清洁雷射光穿透窗可能会突然阻碍了大部分的雷射光穿透它。
- 若要清洁雷射光穿透窗，请用少许沾湿的软布轻柔擦拭。
- 如果电线缠在一起，拔下插头松开电线再使用。
- 若要松开缠住的电线，不要用力拉扯电线。

清理梳齿：

为保持梳齿清洁，用少许沾湿的毛巾轻柔的移除梳齿上的头发以及灰尘。

多人使用的卫生事项：

如果超过一人以上使用，第二副的梳齿可以在收纳盒中找到。第二人使用时轻柔的把健发梳放下来换装第二副梳齿。

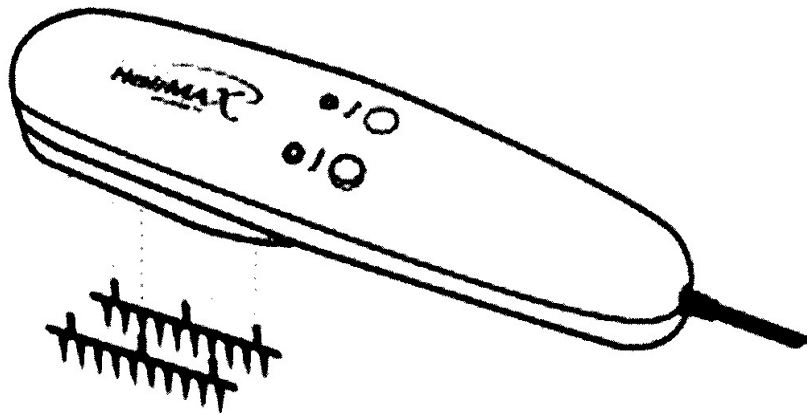

为了更彻底的清洁可小心的取下梳齿来
清洁并且换上第二副梳齿。

请保存这份指示

保固服务说明

1. 本产品自购买日起一年内，正常使用状态下发生故障时，才天将负责维修。
2. 为确保客户的权益，请于购买时要求经销商在保固卡上填上产品序号和购买日期，且盖上店章，消费者请保留产品保固卡或相关的购买证明（如发票或收据）。产品在保固期内有需要维修服务时，烦请提出保固卡或相关购买证明。
3. 客户购买七日内如商品有任何非人为所造成的瑕疵，可凭保固卡、发票等购买证明更换新品，新品更换必须配件齐全并以原箱包装，于七日内提出更换新品要求，逾期以维修方式处理。
4. 保证期满后属维修性质之服务，则本公司酌收维修费用。
5. 除外条款
 - 如有客户自行撕换原厂保固序号贴纸，敝公司即取消保固权益且不予提供维修服务。
 - 如果产品由于天灾、意外或不当的使用、拆解而造成的损毁或故障，不在保固范围内。
 - 产品如由使用者或是非才天认可之工程师自行拆解，则不予保固。
 - 使用非合乎规格的变压器造成的损坏，则不予保固。

本公司信息

才天企业社

台北县土城市中央路二段 145 号 3 楼

TEL: (02) 8262-6507 FAX: (02) 8262-0040

<http://www.tsaitien.com.tw>

营业时间：星期一至星期五 8: 30AM~5: 30PM

