

HairMax 雷射健髮梳

一個典型的使用者經驗

我們大家都知道，皮膚是需要光線的，你的頭髮也不例外。HairMax 雷射健髮梳強大的、安全的以及激發性的雷射光能把能量傳遞到你的頭皮以及毛囊中。

透過光生物激發（PhotoBioStimulation）的原理，雷射光照治療（Laser Phototherapy）持續在改進它的品質、強度以及你頭髮的厚度上努力。雷射光線治療（Laser light therapy），也稱光子治療（photo therapy）在醫學界普遍的被認為是一種安全、有效且沒有已知副作用的療法。

事實上，國際上的經驗以及研究發現雷射光子療法的效用，已經遠遠超過我們在網站上所描述的。

每個人的使用成果都不一樣，但在前 6~12 週裡，你應該能夠注意到你頭髮普遍的改進或是激活化的發生。這些的進步包括頭皮狀況的正常化，頭髮的光澤以及厚度的增加。然後，在接下來的數月裡，你可能會注意到你的頭髮漸漸的豐厚而且強壯。經過一段時日，所有的使用者 –男人以及女人– 通常會注意到使用 HairMax 雷射健髮梳所持續性增多的益處。相反的，一旦停止使用，我們的經驗是頭皮及頭髮的狀況會逐漸回復到使用前的狀態。

就像是刷牙保持你牙齒及牙齦的健康一樣，我們建議你規律的使用 HairMax 雷射健髮梳來維持你所得到的成效。只需一週一次或兩次，每次 10 分鐘就足以維持你使用它所獲得的成果了。

更多資訊，請參考

www.tsaitien.com.tw

以上內容才天企業保留一切版權

使用雷射健髮梳的重要指引

我們建議每次使用雷射健髮梳不少於 5 分鐘，也不超過 15 分鐘

- 頭 4 週每週使用 3 次
- 之後每週 2 次

我們建議雷射健髮梳使用在洗淨的頭皮上。你的頭髮可以是溼的、吹風機吹乾的或是用毛巾擦乾的。雷射健髮梳應該在使用任何作用在頭皮上的髮膠、外用生髮水、噴髮膠或是噴霧假髮類產品前使用。




1. 把變壓器的電源輸出接頭插入雷射健髮梳。



2. 把變壓器插頭插入牆上的插座。



3. 按"Power"鈕一次,然後按"Laser"鈕一次已啟動健髮梳。

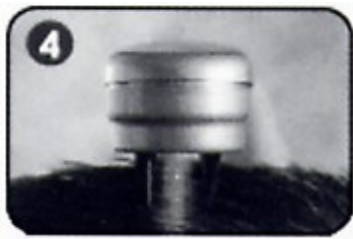

4. 把雷射梳平放在頭皮上,使兩排梳齒接觸到你的頭皮。



Stop and holding 4-5 seconds every 1/2 inch.

5. 一步步的移動雷射梳,每次在頭皮上的一個地方停4或5秒然後移動1/2英吋(1.27公分)到頭皮上下一個地方。(心中默念"one thousand, two thousand, 等." 可能會有幫助你掌握時間)。

6. 逆著頭髮生長的方向移動健髮梳。蓄長頭髮者，在健髮梳移動的前方，用一般的梳子或是你的手撩起頭髮。使健髮梳照上述的方式完整經過全部的頭皮達兩次。
7. 使用後按"power" 鈕關掉電源，移除牆上的變壓器，把健髮梳放入收納盒中。

注意事項

- 每次使用健髮梳的時間應該是介於 5~15 分鐘之間。
- 緩慢的移動健髮梳。這是非常重要的，如果你移動得太快，使用上將不會有效果。
- 如同一般的治療，我們建議你不要過量使用健髮梳，多餘的使用會導致較沒用的效用。


重要的安全指示
-使用前請仔細閱讀-

雷射安全 警告及注意事項：

1. 不要直視雷射光束或雷射藉由鏡面物所反射的光束〈因為這樣如同光束直射眼睛〉。
2. 不要讓雷射光束直射或照射你眼睛的周圍。
3. 不要放在讓小孩拿得到的地方，也不要再在鏡子前使用雷射。
4. 永遠不要用雷射光照射任何人。
5. 用在具有放大功能的光學儀器上時，如果雷射光直接照射眼睛可能會造成眼睛的傷害。
6. 請勿試著修理、深入、改造或阻礙任何使用中的電器用品或是電器用品的任何部分。
7. 只能遵照說明書上的指示使用、清理步驟，或是操作步驟。

注意：這個器具沒有使用者可自行安裝的零件。

以下的安全標籤可以在本產品上發現：

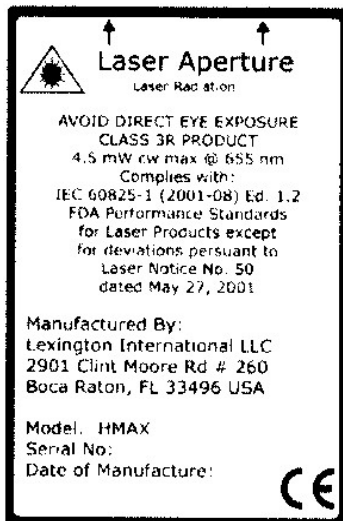

位置：把手的末端

電器安全

使用任何電器用品，特別是小孩在場時，應該觀察到使用時的基本安全不確定事項。

危險：遠離水。如同大部分的電器產品，跟水接觸時會導致觸電。

爲了要減低觸電產生的危險：

- 使用後馬上把電器從插座上拔下。
- 洗澡時不可使用。
- 不要把電器放置在易於掉入澡盆或水槽的地方。
- 不要把電器暴露在流動的水前，掉落在水中或其他液體中。
- 如果電器掉落在水中，要馬上從插座上拔除。不要試著從水中取出，也不要碰觸水。
- 如果在靠近水的地方使用電器，建議使用有接地短路保護線路的電源線。

警告：爲了要減低燃燒電燒，失火或受傷的風險：

- 全程注意使用本電器。
- 當有兒童靠近時，特別注意使用本電器。兒童是天生好奇的，本產品不是玩具，而且不應當在鏡子前玩耍。
- 永遠遵照本產品說明書的用途使用。
- 如果電源線或插頭損壞，或是故障、摔落、損壞或是泡過水，請不要使用，請退回本公司作進一步的檢查保養或維修。
- 電源線應避開熱源。

注意：如果發生故障，請勿私自維修，本產品沒有使用者可自行更換的零件。

電源供應器規格：

變壓輸出：9V，最小安培 300mA。插頭：2.1mm x 5.5mm。

台灣以外地區使用時，請確定變壓器符合以上規格。

保養指示


- 清潔時，永遠把電器從插座上移除。
- 警告！不要將丙酮或任何其他溶解液用於本產品。使用丙酮或任何其他溶解液清潔雷射光穿透窗可能會突然阻礙了大部分的雷射光穿透它。
- 若要清潔雷射光穿透窗，請用少許沾溼的軟布輕柔擦拭。
- 如果電線纏在一起，拔下插頭鬆開電線再使用。
- 若要鬆開纏住的電線，不要用力拉扯電線。

清理梳齒：

為保持梳齒清潔，用少許沾溼的毛巾輕柔的移除梳齒上的頭髮以及灰塵。

多人使用的衛生事項：

如果超過一人以上使用，第二副的梳齒可以在收納盒中找到。第二人使用時輕柔的把健髮梳放下來換裝第二副梳齒。

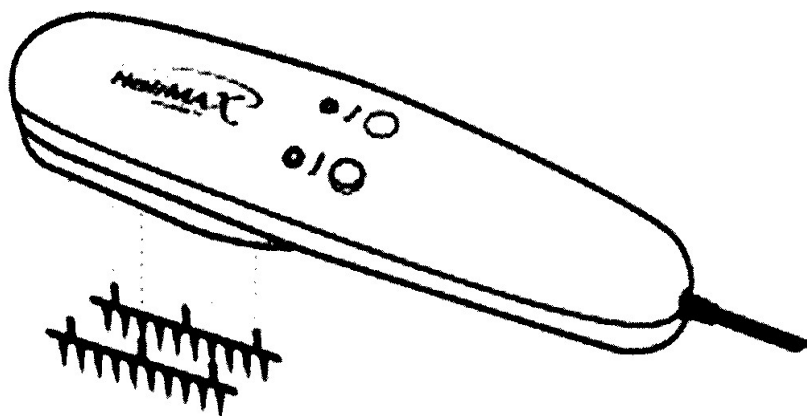

為了更徹底的清潔可小心的取下梳齒來清潔並且換上第二副梳齒。

請保存這份指示

保固服務說明

1. 本產品自購買日起一年內，正常使用狀態下發生故障時，才天將負責維修。
2. 為確保客戶的權益，請於購買時要求經銷商在保固卡上填上產品序號和購買日期，且蓋上店章，消費者請保留產品保固卡或相關的購買證明（如發票或收據）。產品在保固期內有需要維修服務時，煩請提出保固卡或相關購買證明。
3. 客戶購買七日內如商品有任何非人為所造成的瑕疵，可憑保固卡、發票等購買證明更換新品，新品更換必須配件齊全並以原箱包裝，於七日內提出更換新品要求，逾期以維修方式處理。
4. 保證期滿後屬維修性質之服務，則本公司酌收維修費用。
5. 除外條款
 - 如有客戶自行撕換原廠保固序號貼紙，敝公司即取消保固權益且不予提供維修服務。
 - 如果產品由於天災、意外或不當的使用、拆解而造成的損毀或故障，不在保固範圍內。
 - 產品如由使用者或是非才天認可之工程師自行拆解，則不予保固。
 - 使用非合乎規格的變壓器造成的損壞，則不予保固。

本公司資訊

才天企業社

台北縣土城市中央路二段 145 號 3 樓

TEL：(02) 8262-6507 FAX：(02) 8262-0040

<http://www.tsaitien.com.tw>

營業時間：星期一至星期五 8：30AM~5：30PM

